


CATÉTER BALÓN EXTRACTOR DE CÁLCULOS DESCARTABLE

MTW
Endoskopie Manufaktur

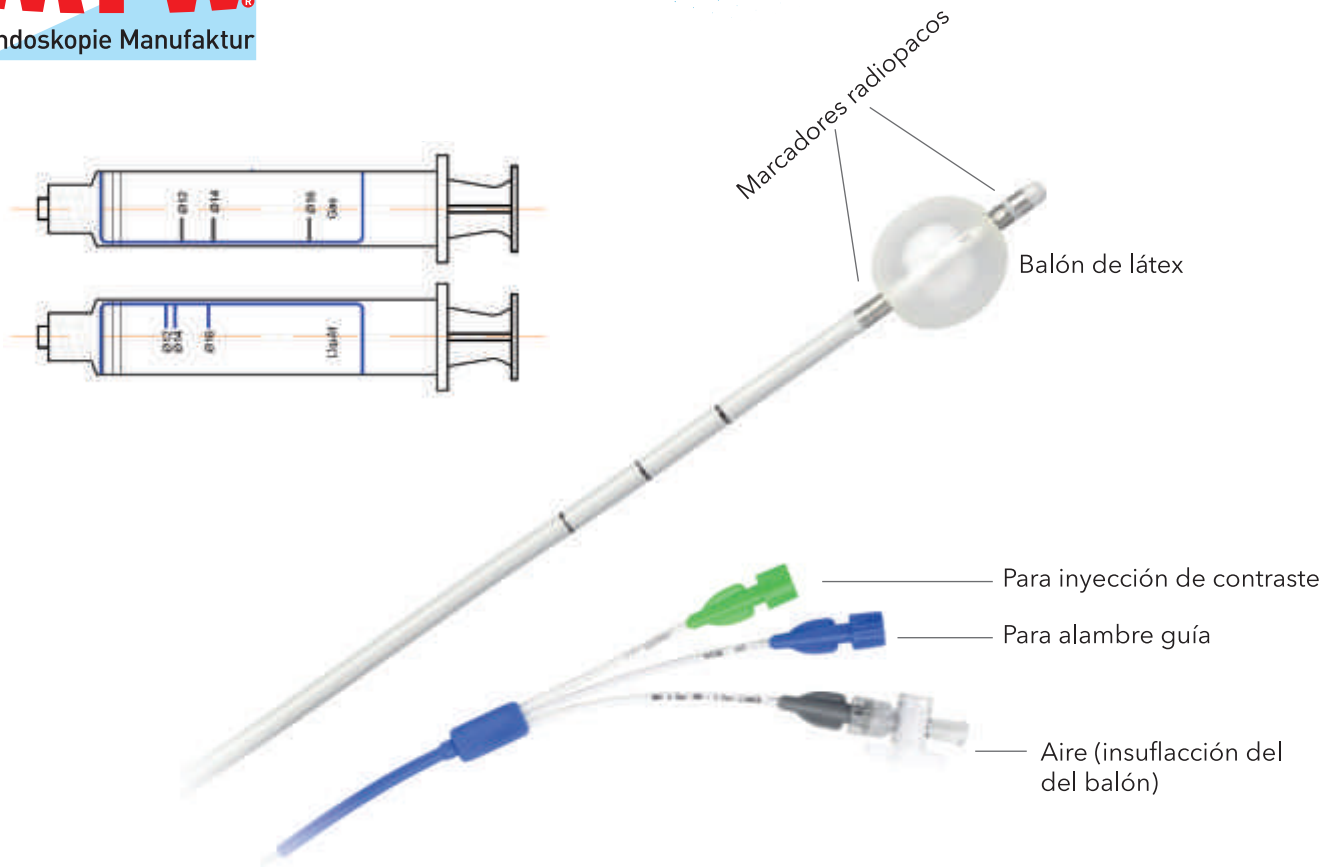

CARACTERÍSTICAS

- › Catéter de triple lumen, uno para inyección de contraste, uno para el alambre guía de 0.035" y otro para insuflación del balón.
- › Balón inflable en el extremo distal con 2 marcas radio-opacas, una en cada extremo del balón, que sirve para determinar la posición exacta del balón inflado.
- › El catéter termina en el extremo distal en forma ahusada.
- › Catéter que acepta alambre guía de 0.035" para mejor posicionamiento.
- › Cuenta con una jeringa con marcaciones predeterminadas 12-14-16mm. que permite la insuflación progresiva.

Ref. No.	Diámetro de catéter	Longitud de catéter	Diámetro del balón	Acepta guía
03207236	7FR	200cm	16mm	0.035"
03267232T	7FR > 5FR	200cm	16mm	0.035"
03267233T	7FR	200cm	16mm	0.035"