


# ESFINTEROTOMO PRE CORTE DESCARTABLE

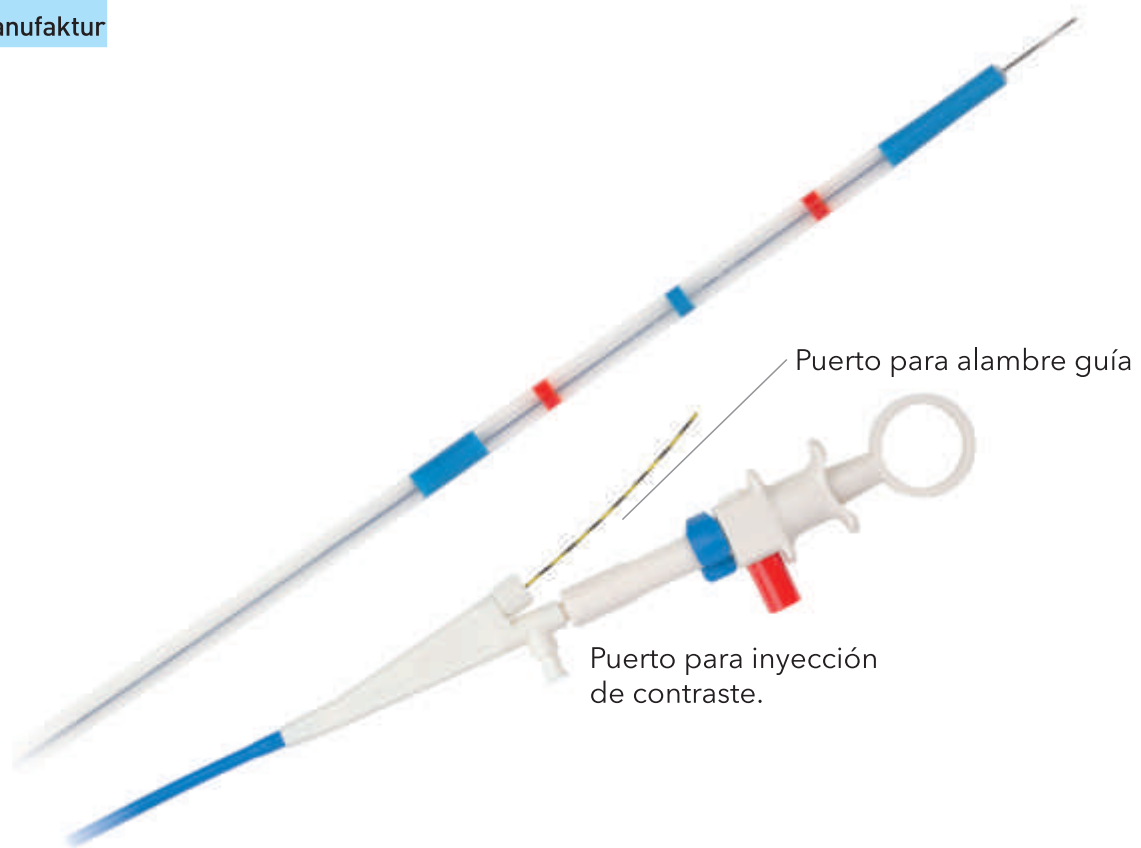

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Catéter que termina en forma ahusada con aguja retráctil distal de 6 mm.
- ▶ En el extremo distal del catéter cuenta con marcación radiopaca para una mejor visualización fluoroscópica.
- ▶ Mango de acción retráctil, que tiene conexión para electro bisturí.
- ▶ El mango cuenta con sujetador que permite graduar la aguja de pre corte.
- ▶ Esfinterótomo con aguja de precorte, que acepta alambre guía de 0.035" e inyección del material de contraste.
- ▶ Descartable.
- ▶ Estéril (EO).

Ref. No.	Longitud aguja	Diámetro de catéter	Diámetro del catéter en extremo distal (mm)	Longitud de catéter
99023121	6mm	2.3mm	1,8	215cm