


ESFINTERÓTOMO TRIPLE LUMEN CON ASA DE CORTE 25 MM DESCARTABLE

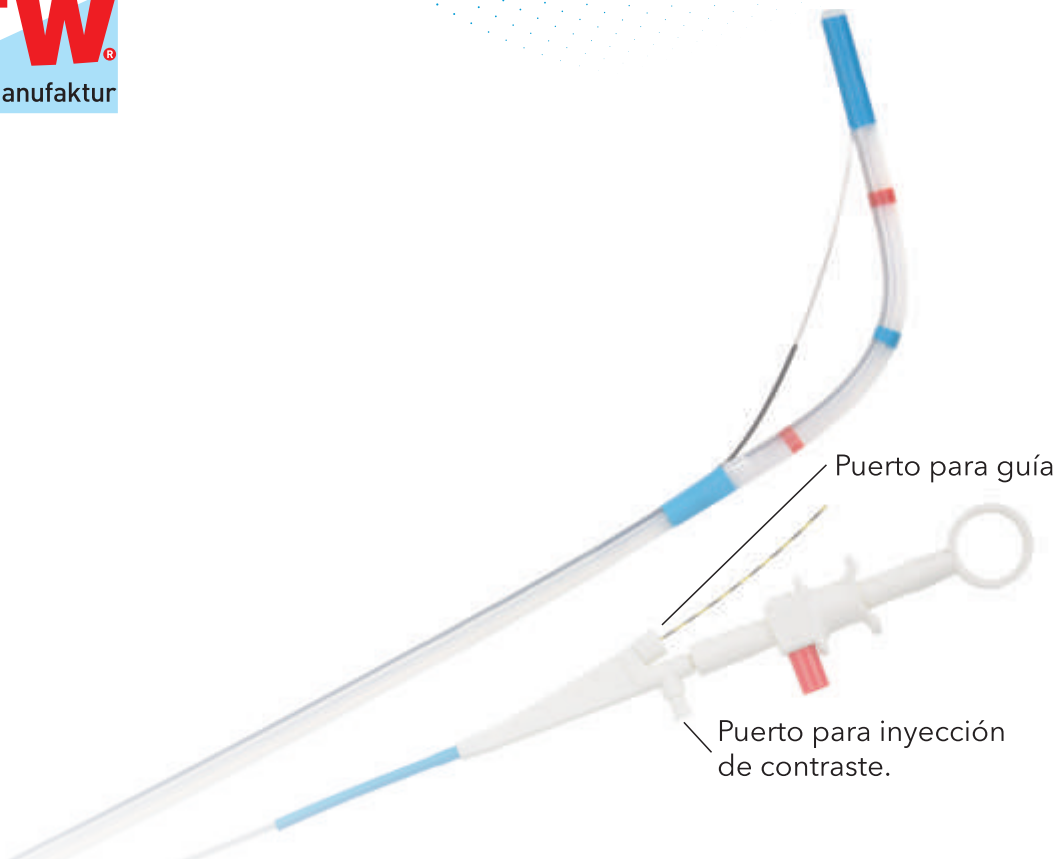

CARACTERÍSTICAS

- › Triple lumen, con tres puertos, un lumen para el alambre de corte, un lumen para la introducción de guía de 0.035" y el otro lumen para la inyección del material de contraste.
- › Mango diseñado para accionar el asa de corte, con conexión para fuente de electro bisturí.
- › En el extremo distal presenta marcas radio pacas para una mejor visualización fluoroscópica.
- › En el Extremo distal termina en una punta cónica redondeada ahusada (roma) la cual permite una excelente orientación, menos traumática y minimizar el riesgo de pancreatitis.
- › Una porción del alambre de corte está protegida por un polímero aislante, minimizando así el riesgo de lesionar el tejido adyacente y protegiendo además la lente del endoscopio.
- › Mango con puerto lateral para una mejor inyección del contraste y mejor comodidad del usuario.
- › Alambre horizontal reforzado de acero inoxidable.
- › Estéril (EO).

Ref. No.	Longitud de asa de corte	Diámetro del catéter (mm)	Diámetro del catéter extremo distal (mm)	Longitud del cateter (cm)
99028371	25mm.	2,45	1,95	215