


# BALONES DE DILATACIÓN DESCARTABLE



Amara

3 STAGE WIRE GUIDED BALLOON

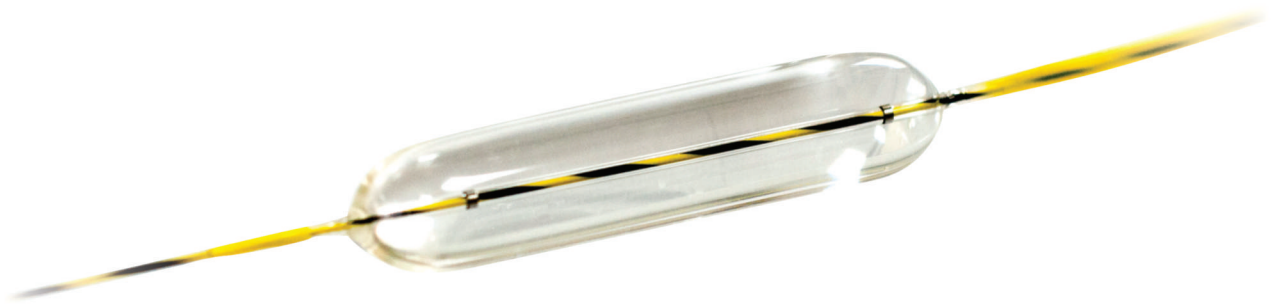

Para tratar las estenosis ubicadas en el tracto gastrointestinal y realizar extracción de cálculos biliares mediante la CPRE, es necesario contar con una potente globo que pueda graduarse de manera precisa.

Amara utiliza el material del balón (Nylon), de mejor resistencia a la presión con un preciso control de dimensionamiento para obtener una dilatación segura.

## **Eficiencia mejorada con el uso de alta presión**

- Ayuda a eliminar la necesidad de utilizar múltiples balones, lo cual permite un tratamiento versátil del tracto gastrointestinal.
- Capacidad de presión optimizada en comparación con los balones dilatadores convencionales.

## **Diseño que proporciona un control preciso**

### ***Preciso control de dimensionamiento***

- Diseñado para proporcionar dilatación progresiva de 3 graduales de la estenosis
- Tratamiento versátil del tracto gastrointestinal con terapia de tamaño preciso. Alta dilatación radial
- Proporciona un bajo nivel de estenosis sin torsión del balón.

### ***Diseño de hombro redondo***

- Diseñado para facilitar la visualización endoscópica
- Proporciona mayor área de superficie del balón durante la dilatación.

### ***Marcador de platino***

- 2 marcadores radiopacos para facilitar el posicionamiento exacto del balón.

| Ref.                         | Diámetro de catéter | Acepta guía | Longitud del catéter | Diámetro inflado | Longitud del balón | Presión de inflación | Canal de trabajo mínimo |
|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Esófago, pilórico y colónico |                     |             |                      |                  |                    |                      |                         |
| GDB-0120655S                 | 7.4fr               | 0.035"      | 240cm                | 6-7-8mm          | 55mm               | 3-6-10 atm           | 2.8mm                   |
| GDB-0120855S                 | 7.4fr               | 0.035"      | 240cm                | 8-9-10mm         | 55mm               | 3-6-10 atm           | 2.8mm                   |
| GDB-0121055S                 | 7.4fr               | 0.035"      | 240cm                | 10-11-12mm       | 55mm               | 3-5-8 atm            | 2.8mm                   |
| GDB-0121255S                 | 7.4fr               | 0.035"      | 240cm                | 12-13.5-15mm     | 55mm               | 3-4.5-8 atm          | 2.8mm                   |
| GDB-0121555S                 | 7.4fr               | 0.035"      | 240cm                | 15-16.5-18mm     | 55mm               | 3-4.5-7 atm          | 2.8/3.2mm *             |
| Esófago y colónico           |                     |             |                      |                  |                    |                      |                         |
| GDB-0121855S                 | 7.4fr               | 0.035"      | 240cm                | 18-19-20mm       | 55mm               | 3-4.5-6 atm          | 2.8/3.2mm *             |

\*Requiere un canal de endoscopio de 2.8mm de marca Olympus o un canal de endoscopio de 3.2mm de marca Pentax o Fujinon.\*\*

\*\*Todas las marcas registradas citadas son propiedad de sus respectivos dueños