

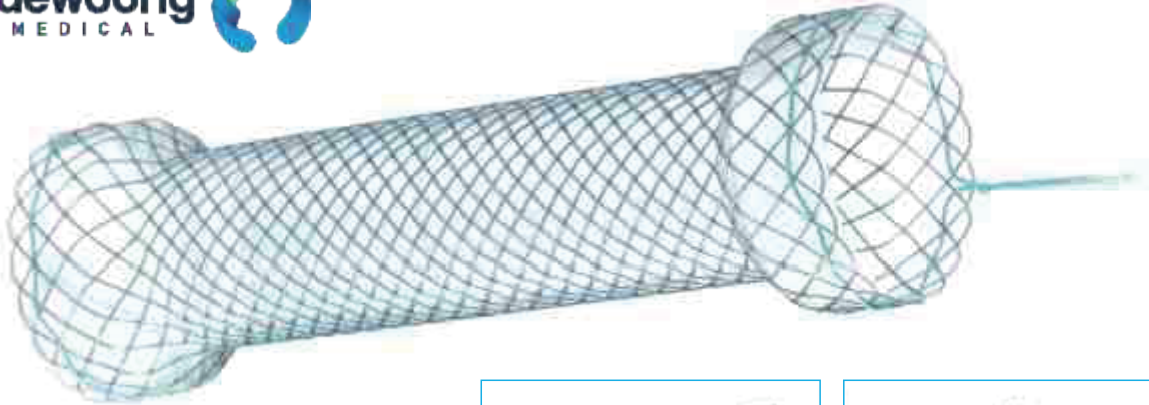


# STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICO PARCIAL Y TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICONA

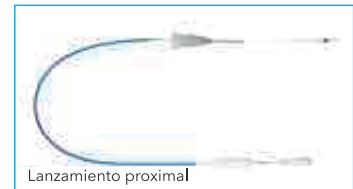

**\*INDICACIÓN:**  
Estenosis esofágica  
benigna y maligna.

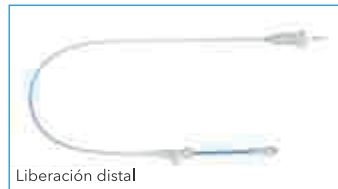

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estructura trenzada con celdas fijas
  - Alta flexibilidad y fuerza radial optima.
  - Ambos extremos de la cabeza (8mm más grande que el cuerpo) ayuda a minimizar la migración.
- ▶ Cubierta y parcialmente cubierta de silicona y extremos redondos blandos
  - Reduce el crecimiento del tejido y la reacción de la hiperplasia
- ▶ Sutura verde visible para una fácil extracción  
Marcas radiopacas: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio.

PARCIAL CUBIERTA					
Código	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
ES2008B	20mm	8cm	20 FR	70cm	0.038"
ES2010B	20mm	10cm	20 FR	70cm	0.038"
ES2012B	20mm	12cm	20 FR	70cm	0.038"
ES2015B	20mm	15cm	20 FR	70cm	0.038"

TOTALMENTE CUBIERTA					
Código	Diámetro	Longitud	Catéter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
ES1810F	18mm	10cm	16 FR	70cm	0.038"
ES1812F	18mm	12cm	16 FR	70cm	0.038"
ES2008F	20mm	8cm	20 FR	70cm	0.038"
ES2010F	20mm	10cm	20 FR	70cm	0.038"
ES2012F	20mm	12cm	20 FR	70cm	0.038"
ES2015F	20mm	15cm	20 FR	70cm	0.038"