


# CESTA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cesta de alambre de nitinol resistente a la torsión con construcción redonda que facilita la captura eficiente y la manipulación atraumática de cálculos.
- ▶ Vaina de baja fricción y resistente a las torceduras que proporciona un paso endoscópico suave.
- ▶ Disponible en diferentes diseños: **sin punta** que permiten una mayor proximidad a los cálculos; cestas con punta que facilitan el acceso a los cálculos en anatomías complejas.
- ▶ **Mango ergonómico** que facilita un excelente control con una sola mano durante el procedimiento.

Los mangos y las vainas se pueden desmontar fácil y completamente; el núcleo de nitinol puede dejarse en su lugar, funcionando como guía cuando la cesta no se puede separar del cálculo; la cesta se puede volver a montar fácilmente una vez retirada del paciente.

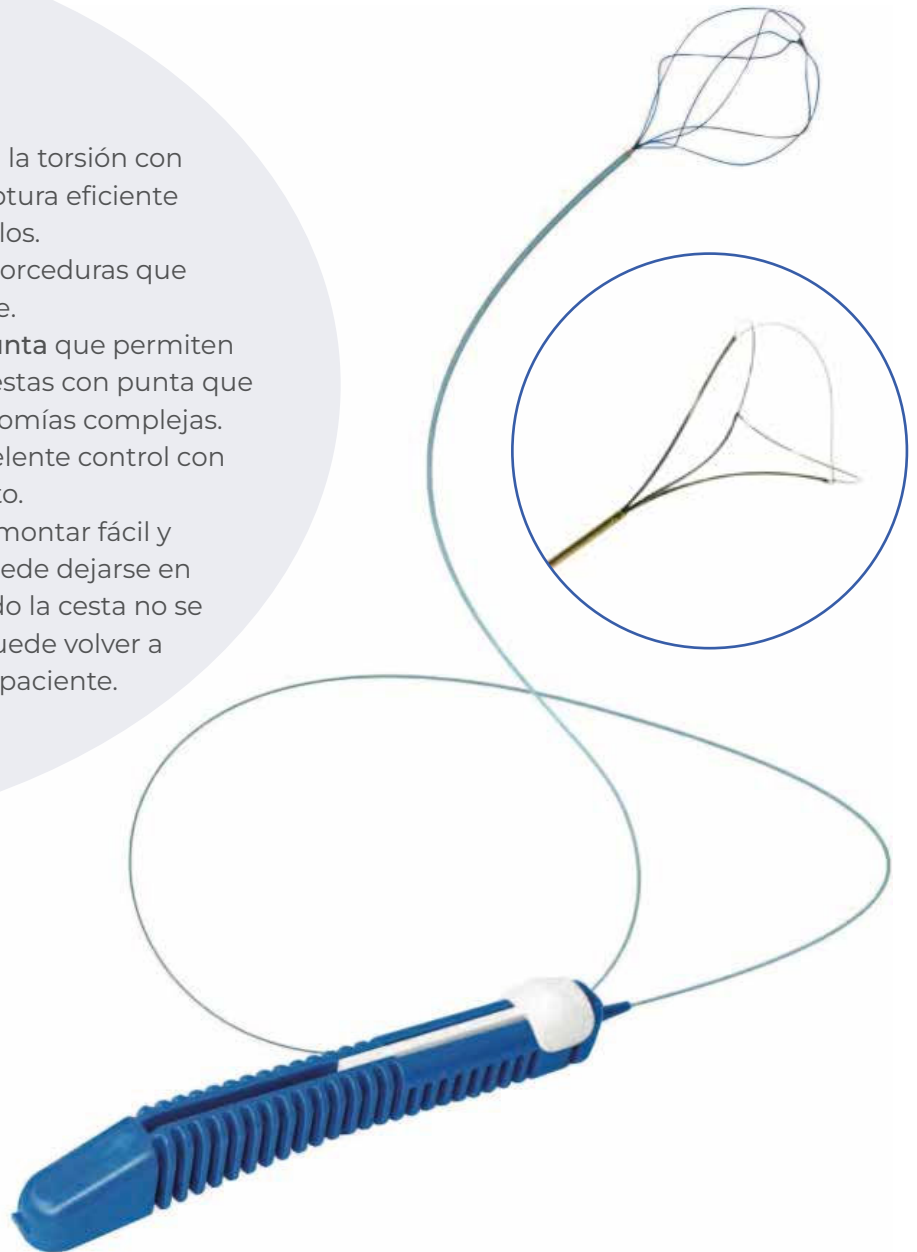

| Ref. No    | Lado (Fr) | Longitud de trabajo (cm) | Descripción de la cesta | Canasta OD (mm) |
|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| U04B011010 | 1.7       | 130                      | 3 cables, punta abierta | 8               |
| U04B011110 | 1.7       | 130                      | 3 cables, punta abierta | 11              |